

ATEX TOR

ロボットみたいなフットマッサージャー
いつもそばで癒してくれる「快足 フットロン」発売



家に帰ればフットロン

快足 フットロン
FOOTRON

健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス（本社：大阪市 代表取締役社長 原島 恵子 以下：アテックス）は、アテックストールシリーズから、ロボットみたいなフットマッサージャー「快足 フットロン（AX-HJ132）」を2025年3月14日より発売します。

置いておくだけで愛くるしいロボットのようなフットマッサージャー「快足フットロン」。足をすっぽり入れるだけで今日の疲れを食べてくれるイメージで、加圧収縮エアバッグと足裏ローラーで疲れた足をもみほぐします。ワンボタン操作だから使い方もとても簡単です。



bk（ブラック）

3つの機能で快足をサポート

エアバッグ・エアカプセル・もみプレート・ローラーの組み合わせで一日の足の疲れをやわらげ、血行を促進します。足の甲部分にはヒーターを内蔵し、じんわり温めながらマッサージすることもできます。足の対応範囲は22cm~28cmです。

足の甲を温める温熱機能
足の甲部分にヒーターを配し、温めながらマッサージができます。

足の甲エアバッグ
足を下側へおさえ、もみプレートやローラーの強さを調整します。

POINT 1

3つの機能

- | | | |
|------|--------------|---|
| ①足先 | もみプレート | 足指の付け根から指先にかけてを、グイッと押しつけるようにマッサージします。 |
| ②かかと | エアバッグ&エアカプセル | エアバッグがかかとを両側から挟み込み、加圧・収縮をくりかえすことで、血行を促進します。 |
| ③足裏 | ローラー | 土踏まずを中心に、ゴリゴリ感のあるローラーが足裏を刺激し、疲れを取ります。 |

①足先
グイッと!
もみプレート



②かかと
グイッと!
エアバッグ&
エアカプセル



③足裏
ゴリゴリッと!
ローラー

アナログ感覚のシンプル操作


電源/モード選択ボタンでマッサージのモードを選択し、ダイヤルを回して強さを決めます。

POINT 2

電源/モード選択ボタン

-  1回押し 電源ON 足全体モード
-  2回押し 足裏モード
-  3回押し 足全体モード&ヒーター
-  4回押し 足裏モード&ヒーター

ダイヤルで強さを選択

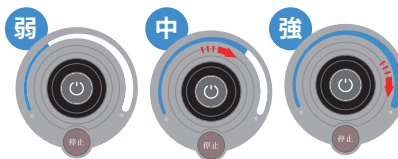

マッサージモード

- 足全体モード** 足先、足裏、かかとの足全体をもみほくして、足の疲労を回復させます。
- 足裏モード** 足裏を中心にローラーが土踏まずをゴリゴリとマッサージします。

持ち手付で移動も楽々

POINT 3

大きな持ち手はサッと持ち上げることができ、移動にも便利です。



ABOUT THE PRODUCT

機能はもちろん、じっと見てるとなんだか癒される我が家のロボットのようなフットマッサージャー「快足 フットロン」。フットは足、ロンはフランス語源のロンロン（猫が心地よいときにゴロゴロ喉を鳴らす音）から、足の疲れが取れ、どんどん気持ちよくなっていくという思いを込めた名称です。



SPEC

品名	快足 フットロン
品番	AX-HJ132bk（ブラック）
価格	24,750円（税込）
サイズ	本体（約）W420×L400×H290mm
重量	約4.5kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	48W（ヒーター16W）
ヒーター温度	約45℃
タイマー	15分自動オフ
足サイズ	22cm～28cm
付属品	ACアダプター
医療機器の種類	管理医療機器（家庭用電気マッサージ器）
医療機器認証番号	306AABZX00057000
使用目的又は効果	あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 (疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解。)



bk（ブラック）

INFORMATION

ブランド「アテックストール」について

本物を知る大人たちへ ——

全身をマッサージする大型ソファタイプから部位別の小型マッサージャーまで、ストレス社会に暮らす大人たちに極上のリラックスタイムを届けます。落ち着いたデザインと先進機能でゆったりとした時間をお過ごしください。

株式会社アテックス

事業内容

健康・美容家電（家庭用医療機器、マッサージ機器、エクササイズ機器など）、
快眠生活寝具（収納式ベッド、機能マットレスなど）の企画・開発・製造および販売

本社

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24 tel:06-6799-8100(代) fax:06-6799-8118(代)
公式サイト <https://www.atex-net.co.jp/>